

キャンペーン  
2019年9月末  
受注分まで

ルーチン倒立顕微鏡のスペシャルパッケージ

**ZEISS Primovert / Primovert iLED / Primovert HDcam**



ZEISS Primovert



ZEISS Primovert HDcamと10インチモニター

機能とデザインで好評をいただいているルーチン倒立顕微鏡Primovertシリーズを特別価格にて提供いたします。ラボのルーチンワークにZEISSの顕微鏡を導入してみませんか。

#### 細胞チェックに最適 Primovert


- 透過照明には長寿命で経済的、調整不要のLED照明を全パッケージに採用。
- 15分で電源を自動的にOFFにする自動電源OFF機能。消費電力の節約になるのはもちろん、ステージ側面のスイッチで簡単に再起動できるので作業効率を大幅に向上。

#### GFP発現評価に最適 Primovert iLED

- 蛍光光源に狭帯域性に優れたLED光源を採用。細胞に有害なUVやIRの波長が少なく、細胞へのダメージを低減。
- 長時間のウォームアップが必要な従来型の水銀光源と異なり、スイッチを入れるだけでいつでもすぐに観察が可能。
- LEDは長寿命で面倒なランプ交換が不要。

#### カメラ内蔵のコンパクトボディ Primovert HDcam

- 500万画素カラーカメラ内蔵。
- 接眼レンズをなくし、モニターで観察することにより、これまでにないコンパクトサイズを実現。顕微鏡をクリーンベンチ内部に設置して使用することも可能。
- 多様な接続方法に対応。モニター接続、PC接続、無線LANルーターを用いたiPad接続に対応。

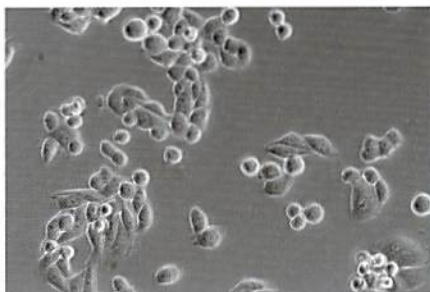

HeLa細胞、位相差、倍率20x



U2OS細胞、GFP標識アクチン、倍率20x



Primovert HDcamはフロントホルダーに iPad等のモニターを設置可能。

キャンペーン価格(税抜) **248,000円**～





## ■ 簡単、使いやすい

培養フラスコの観察が可能



培養フラスコなどの大型容器を観察する場合にはコンデンサーを簡単に取り外すことが可能。

透過光と蛍光の切替えがワンタッチ



鏡基側面のスイッチで透過光と蛍光を切替え。(Primovert iLEDのみ)

画像撮影と保存が簡単



鏡基フロントの操作ボタンやリモコンから画像の撮影と保存。(Primovert HDcamのみ)


## ■ Primovert HDcam - 多様な接続方法

シンプル操作 - モニター接続



モニター接続時には鏡基側面に挿入したSDカードに撮影した画像を保存。

画像の共有が可能 - iPad接続

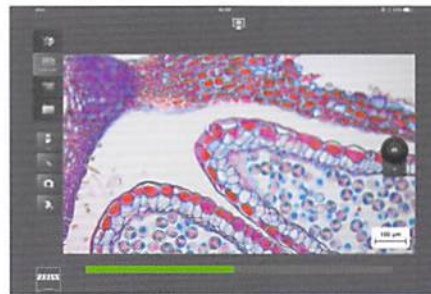

無償でダウンロード可能なiPad用アプリLabscopeを用いると複数のユーザーで画像の共有も可能。(Wi-FiルーターとiPadが必要)

多様な機能 - PC接続



PC接続時は無償ソフトウェアZEN liteを用いて画像の撮影が可能。

	通常価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
<b>Primovert 双眼パッケージ</b> Primovert 双眼鏡基 [対物レンズ]プランアクロマート 4x Ph0 [透過照明]LED透過光源 [コンデンサー]LDコンデンサー-0.3、コンデンサーズライダ 2ポジション、位相差絞りPh0	360,000円	248,000円
<b>Primovert 三眼パッケージ</b> Primovert 三眼鏡基 [対物レンズ]プランアクロマート 4x Ph0 [透過照明]LED透過光源 [コンデンサー]LDコンデンサー-0.3、コンデンサーズライダ 2ポジション、位相差絞りPh0	410,000円	298,000円
<b>Primovert iLEDパッケージ</b> Primovert iLED 鏡基 [対物レンズ]プランアクロマート 4x Ph0 [透過照明]LED透過光源 [蛍光装置]LED光源 470nm、蛍光フィルター38HE、UV蛍光保護プレート [コンデンサー]LDコンデンサー-0.3、コンデンサーズライダ 2ポジション、位相差絞りPh0	839,000円	598,000円
<b>Primovert HDcamパッケージ</b> Primovert HDcam鏡基 [対物レンズ]プランアクロマート 4x Ph0 [透過照明]LED透過光源 [コンデンサー]LDコンデンサー-0.3、コンデンサーズライダ 2ポジション、位相差絞りPh0 [付属品]10インチモニター	674,000円	498,000円

※当キャンペーン価格は2019年9月30日受注分までが対象となります。当キャンペーンは、他のキャンペーンとの併用はできません。

Carl Zeiss 株式会社  
マイクロスコピーディビジョン

〒160-0003  
東京都新宿区四谷本町2番8号  
Tel 03-3355-0332  
Fax 03-3359-2118

代理店

大阪営業所 Tel 06-6337-5465  
名古屋営業所 Tel 052-777-1415  
福岡営業所 Tel 092-713-7662  
仙台営業所 Tel 022-224-5655



microscopy.ja@zeiss.com  
www.zeiss.co.jp/microscopy



P19 MIC\_025 1911171717 Printed in Japan  
 本カタログは参考用であり、価格目的、医学目的、教育目的に使用される場合があります。正確な情報は各製品の取扱説明書またはお問い合わせください。