



ベックマン・コールター 核酸抽出キット

植物からの DNA/RNA 抽出試薬
無償サンプル **増量** キャンペーン



AMPure XPのSPRI磁性ビーズを用いた、植物からのDNA/RNA抽出キット

ChloroPure

無償サンプルを増量して **30 preps** をお届けします!

※通常は 10 preps の提供です。

期間 | ~ 2022年6月30日(木) 受付分まで

- ❖ 植物の葉・種 最大 40 mg に対応、~ 7 μ g の DNA 収量
- ❖ DNA/RNA の同時抽出、RNA 抽出に対応
- ❖ 磁性ビーズと磁石を使ったシンプルな抽出プロトコル
- ❖ 大規模な植物ジェノタイピングプロジェクトに採用実績のあるキット製品

弊社は米国系メーカーですが…

- ❖ 無償サンプルに日本語マニュアルを添付



磁性ビーズ核酸抽出は、自動分注機で簡単に自動化




ベックマン・コールターの自動分注機 Biomek i-Series なら
サンプル破碎して遠心したサンプルをセットして

96 サンプルをわずか約 40 分で DNA 抽出が可能です。


お申込みは裏面をご覧ください。 [販売代理店様経由にてお申込みください。](#)

植物からの DNA/RNA 抽出キット ChloroPure

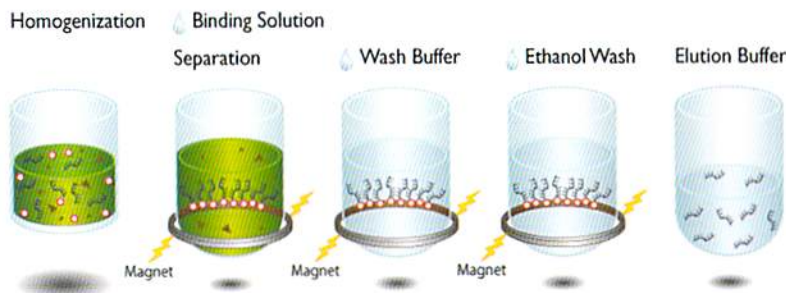

DNA/RNA 同時抽出ワークフローは とてもシンプルな実験操作です。

Lysis バッファーでサンプル破碎後、磁性ビーズに核酸を結合させ、Wash バッファーと 70% エタノールでの洗浄後に、精製核酸の溶出となります。

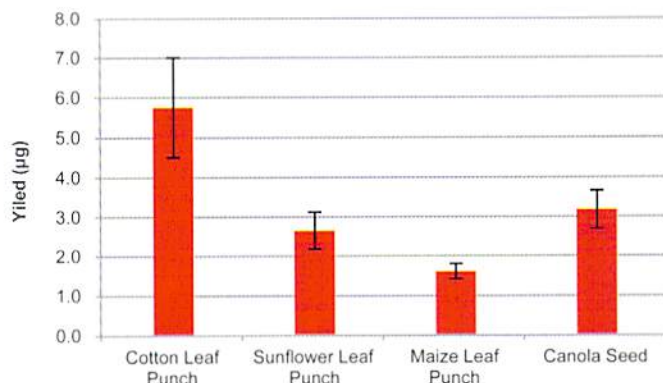

Sample	A260 / A230
	ChloroPure
Maize Leaf Punch	20.9
Sunflower Leaf Punch	1.52
Canola Seed	1.69

綿花葉片、ヒマワリ葉片、トウモロコシ葉片、カノーラ種子から ChloroPure を使用して核酸を抽出し、DNA 収量および精製度を分光光度計により測定しました (n=18)。

Ordering Information

製品名	サイズ	製品番号	メーカー希望小売価格 (税抜)
ChloroPure	384 preps	A47949	¥125,000
	9,600 preps	A47951	¥1,364,000

※価格は変更する場合がありますのでご了承ください。

ChloroPure 無償サンプル提供 ~ 増量キャンペーン

マグネットアクセサリー (96 ウェルプレート用 or 1.5 ~ 2 mL チューブ用) も貸出いたします。

販売店ご担当者へ **お名前・部署・Eメール・住所・電話番号**
ご希望製品・貸出マグネット種類 (プレート or チューブ) をお伝えください。

サンプル品は使用方法・性能の試用のためのご使用に限定させていただきます。

サンプル品の提供は製品を使用されたことのないお客様に限定させていただきます、研究室・部署について1回までのお申込みとさせていただきます。

Beckman Coulter および Beckman Coulter ロゴは、Beckman Coulter, Inc. の登録商標です。

ベックマン・コールター株式会社

本社：〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー

お客様専用 ☎ 0120-566-730 ☎ 03-6745-4704

✉ bckk_ls_web@beckman.com URL <https://www.beckman.jp>

本内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。